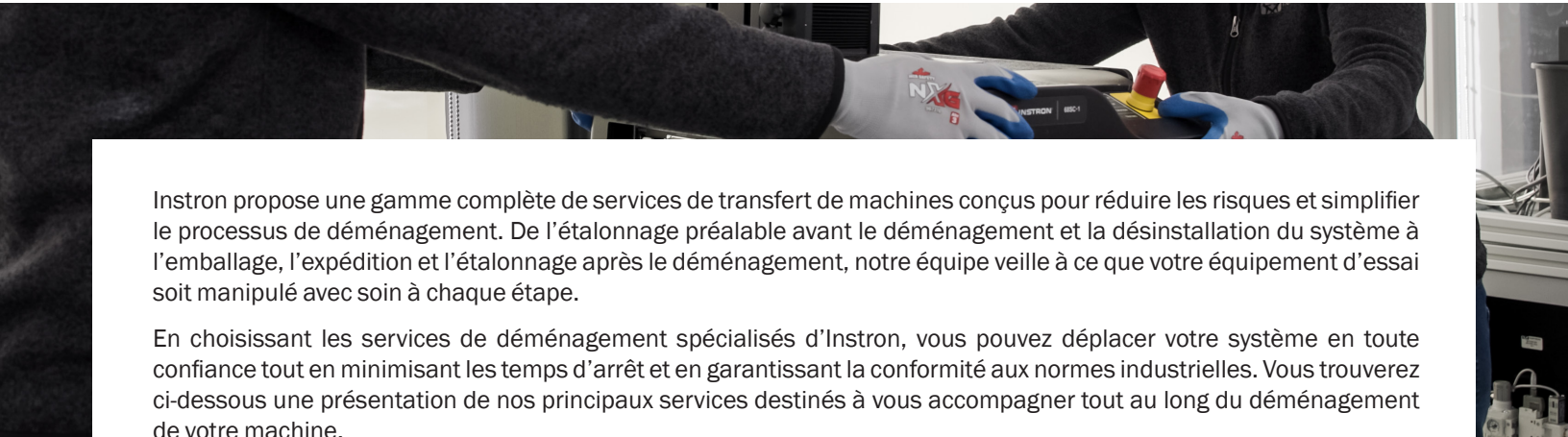




Instron propose une gamme complète de services de transfert de machines conçus pour réduire les risques et simplifier le processus de déménagement. De l'étalonnage préalable avant le déménagement et la désinstallation du système à l'emballage, l'expédition et l'étalonnage après le déménagement, notre équipe veille à ce que votre équipement d'essai soit manipulé avec soin à chaque étape.

En choisissant les services de déménagement spécialisés d'Instron, vous pouvez déplacer votre système en toute confiance tout en minimisant les temps d'arrêt et en garantissant la conformité aux normes industrielles. Vous trouverez ci-dessous une présentation de nos principaux services destinés à vous accompagner tout au long du déménagement de votre machine.

### Étalonnage avant déplacement

L'étalonnage préalable établit une référence pour la précision du système, réduisant les risques et validant l'ensemble des tests réalisés antérieurement.

### Les services de désinstallation comprennent :

- Retrait des éléments accessoires et des fixations
- Positionnement de la traverse pour l'expédition
- Débranchement et regroupement des câbles externes
- Retrait du PC ou écran tactile monté (le cas échéant)
- Support et conseils sur la manière appropriée de soulever le bâti

### Emballage, mise en caisse et expédition

Instron peut coordonner l'emballage et l'expédition avec des manutentionnaires et des transporteurs tiers, en fournissant des matériaux d'emballage et des caisses sur mesure selon les besoins.

### Services de réinstallation

- Mise à niveau du système
- Remontage du PC ou écran tactile (le cas échéant)
- Rebranchement des câbles et des fixations
- Démarrage du système et vérification des logiciels

### Étalonnage après déménagement

Conformément aux normes ASTM et ISO, les machines d'essai universelles et les capteurs doivent être étalonnés après chaque déplacement, sauf s'ils sont conçus pour un usage portable. Les machines d'essai universelles Instron n'étant pas portables, un étalonnage est donc requis afin de maintenir la conformité et la précision des mesures.

### Validation IQOQ

Afin de garantir la conformité aux systèmes de gestion de la qualité, Instron peut procéder à la revalidation sur site de la documentation IQOQ existante ou réaliser une nouvelle qualification IQOQ si nécessaire.

**Demander un devis**

[www.instron.com](http://www.instron.com)